

Avedro, Inc. Sistema KXL

Manuale dell'operatore

ML-00008

Revision K

Effective 18 Jun 2014

Copyright 2013

Tutti i diritti riservati

Stampato negli U.S.A.

Brevetti, marchi di fabbrica e copyright

Il Sistema KXL è coperto da una o più domande di brevetto rilasciato o pendente negli Stati Uniti d'America e nel mondo.

Il logo "KXL" e Avedro sono marchi depositati o commerciali di Avedro, Inc. Tutto il software e la documentazione sono soggetti ai copyright di Avedro, Inc. Tutti i diritti riservati 2013.

Microsoft e Windows sono rispettivamente marchi depositati o marchi commerciali di Microsoft Corporation. Ogni altro marchio commerciale o i marchi di servizio contenuti in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

il distributore autorizzato locale
Avedro



Avedro, Inc.
230 Third Avenue
Waltham, MA 02451

Rappresentante autorizzato

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
Paesi Bassi
Telefono: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



Indice

Capitolo -

1	Premessa	1-1
1.1	Usò previsto del manuale.....	1-1
1.2	Usò previsto / Indicazioni d'uso.....	1-1
1.3	Liberatoria per le modifiche progettuali	1-1
1.4	Liberatoria per la riproduzione	1-1
1.5	Dichiarazione sull'assistenza fornita all'utente	1-1
1.6	Controindicazioni, avvertenze e avvisi di attenzione	1-2
	1.6.1 Controindicazioni.....	1-2
	1.6.2 Avvertenze	1-2
	1.6.3 Avvertenza per la sicurezza elettrica.....	1-2
1.7	Sicurezza del paziente.....	1-4
1.8	Ulteriori considerazioni sulla sicurezza	1-4
1.9	Avviso di conformità FCC.....	1-4
2	Introduzione	2-1
2.1	Panoramica del sistema.....	2-1
	2.1.1 Componenti principali.....	2-2
3	Funzionamento del sistema	3-1
3.1	Caricamento della batteria del KXL	3-1
3.2	Usò del touchpad e della tastiera	3-1
3.3	Energia UV (dose)	3-3
3.4	Preparazione del sistema.....	3-4
3.5	Operazioni importanti precedenti all'accensione del sistema	3-4
3.6	Accensione del sistema.....	3-4
3.7	Impostazione del periodo di induzione della Riboflavina	3-6
3.8	Selezione della modalità di trattamento.....	3-6
	3.8.1 Modalità di trattamento UV Continuous.....	3-7
	3.8.2 Esposizione a radiazioni UV pulsate.....	3-9
3.9	Avvio del trattamento	3-12
	3.9.1 Materiali smaltibili monousò	3-13
	3.9.2 Materiali smaltibili multiusò	3-13
	3.9.3 Limiti controllati dalla scheda RFID.....	3-14
	3.9.4 Sincronizzazione di allineamento a distanza.....	3-15
3.10	Preparazione del paziente	3-17
3.11	Avvio del trattamento	3-20
3.12	Monitoraggio del trattamento	3-21
3.13	Sospensione del trattamento	3-21
3.14	Trattamento completato	3-22
3.15	Sospensione temporanea o annullamento del trattamento	3-23
3.16	Spegnimento del sistema.....	3-25

3.17	Usò del menu Impostazioni del dispositivo	3-27
3.17.1	Impostazioni avanzate	3-27
3.17.2	Modifica della lingua del sistema.....	3-28
3.17.3	Modifica dell'intensità dei crocini di allineamento	3-28
3.17.4	Modifica del volume del sistema	3-29
3.17.5	Copia dei dati di trattamento su USB.....	3-29
3.17.6	Schermata di modifica dei parametri predefiniti di trattamento	3-31
4	Manutenzione/Assistenza	4-1
4.1	Informazioni sull'installazione	4-1
4.2	Manutenzione affidata al cliente	4-1
4.3	Garanzia	4-1
4.4	Informazioni sul contratto di assistenza.....	4-1
4.5	Materiali monouso per il paziente.....	4-1
4.6	Risoluzione dei problemi	4-2
4.7	Istruzioni per la sterilizzazione o la disinfezione.....	4-3
4.8	Pulizia del sistema.....	4-3
4.9	Pulizia dell'apertura.....	4-3
4.10	Regolazione del braccio articolato.....	4-3
4.11	Esecuzione della manutenzione periodica	4-4
4.12	Spostamento del sistema	4-4
4.13	Stoccaggio del sistema	4-4
4.14	Software	4-5
4.15	Identificazione dei rischi associati all'eliminazione dei prodotti di rifiuto	4-5
4.16	Esecuzione di un controllo a vista	4-6
5	Classificazione dell'attrezzatura.....	5-1
6	Legenda dei simboli	6-1
7	Specifiche tecniche	1

Indice delle figure

Figura 2-1. Panoramica del sistema	2-2
Figura 2-2. Illustrazioni del sistema con didascalie	2-3
Figura 2-3. Wireless a distanza	2-3
Figura 2-4. Etichetta KXL	2-4
Figura 2-5. Etichetta di emissione UV	2-4
Figura 2-6. Etichetta di classificazione del laser	2-4
Figura 3-1. Interruttore generale.....	3-4
Figura 3-2. Schermata di avvio	3-5
Figura 3-3. Schermata del periodo di induzione	3-6
Figura 3-4. Schermata di selezione della modalità di trattamento Continuous.....	3-7
Figura 3-5. Schermata dei parametri di trattamento Continuous	3-8
Figura 3-6. Schermata di conferma dei parametri di trattamento Continuous	3-8
Figura 3-7. Selezione della schermata della modalità di trattamento Pulsed	3-9
Figura 3-8. Schermata dei parametri di trattamento Pulsed.....	3-10
Figura 3-9. Schermata di impostazione dei tempi del ciclo di impulsi UV.	3-10
Figura 3-10. Schermata di conferma dei parametri di trattamento Pulsed	3-11
Figura 3-11. Lettura dei materiali smaltibili monouso	3-12
Figura 3-12. Schermata di lettura dell'etichetta	3-13
Figura 3-13. Trattamenti rimasti	3-13
Figura 3-14. Trattamento finale	3-14
Figura 3-15. Nessun trattamento rimasto	3-14
Figura 3-16. Parametri di trattamento non validi	3-15
Figura 3-17. Stato dell'impostazione del sistema	3-15
Figura 3-18. Schermata Preparazione del paziente.....	3-17
Figura 3-19. Allineamento dei crocini durante l'induzione	3-18
Figura 3-20. Funzioni del comando a distanza	3-18
Figura 3-21. Allineamento dei crocini rossi degli assi X e Y e del puntino verde dell'asse Z	3-19
Figura 3-22. Allineamento dei crocini rossi degli assi X e Y e dei crocini rossi dell'asse Z	3-19
Figura 3-23. Induzione completata.....	3-20
Figura 3-24. Schermata Trattamento	3-21
Figura 3-25. Schermata Trattamento in pausa	3-21
Figura 3-26. Schermata Trattamento completato.....	3-22
Figura 3-27. Schermata iniziale di conferma della cancellazione di una sessione	3-23
Figura 3-28. Conferma di cancellazione di un trattamento parziale.....	3-23
Figura 3-29. Informazioni su un trattamento parziale	3-24
Figura 3-30. Spegnimento	3-25
Figura 3-31. Interruttore in posizione "Spento" (OFF)	3-26
Figura 3-32. Spina del sistema KXL	3-26
Figura 3-33. Menu Device Settings	3-27
Figura 3-34. Modifica della lingua del sistema	3-28
Figura 3-35. Edit Alignment Crosshairs Intensity	3-28
Figura 3-36. Edit Volume.....	3-29
Figura 3-37. Trasferimento delle impostazioni del dispositivo su USB.....	3-30
Figura 3-38. Selezione della modalità di trattamento predefinita	3-31
Figura 3-39. Modifica dei parametri di trattamento predefiniti (Continuous e Pulsed)	3-31
Figura 3-40. Modifica dei parametri di impulso UV predefiniti (solo Pulsed).....	3-32
Figura 4-1. Perdita della sincronizzazione con il comando a distanza	4-2

Figura 4-2 Spostamento di configurazione del sistema 4-4

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.

1 Premessa

1.1 Uso previsto del manuale

Questo manuale è destinato agli operatori del Sistema KXL di Avedro, Inc. Il manuale contiene tutte le istruzioni operative, le illustrazioni del prodotto, le riproduzioni delle schermate, i messaggi di risoluzione dei problemi e degli errori e altre informazioni rilevanti. Spetta all'operatore garantire la rigorosa applicazione di tutte le istruzioni del manuale concernenti la sicurezza.

1.2 Uso previsto / Indicazioni d'uso

Il Sistema KXL eroga una dose uniforme e misurata di luce ultravioletta (UVA) su un'area terapeutica bersaglio per illuminare la cornea durante gli interventi di crosslinking corneale stabilizzando la cornea indebolita dalla patologia o dalla chirurgia refrattiva.

1.3 Liberatoria per le modifiche progettuali

- A seguito di modifiche progettuali e miglioramenti del prodotto, le informazioni di questo manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. Avedro, Inc. (d'ora in poi denominata "Avedro") si riserva i diritti di modificare in qualsiasi momento il progetto del prodotto senza preavviso. Ciò potrebbe in seguito influire sui contenuti di questo manuale.
- Avedro declina ogni responsabilità per gli errori eventualmente contenuti in questo manuale. Avedro si impegnerà in ogni modo ad assicurare che il manuale sia aggiornato e conforme al Sistema KXL spedito.
- Le schermate del computer riprodotte in questo manuale sono fornite unicamente a scopo dimostrativo. In base alla versione del software del sistema, possono sussistere minime differenze tra le effettive schermate del computer e quelle raffigurate nel manuale.
- Tutti i dati dei pazienti pubblicati in questo documento, comprese le riproduzioni dei grafici delle schermate sono fittizi e forniti unicamente a scopo d'esempio. Non è stata pertanto violata la riservatezza di nessun paziente con o senza il suo consenso.

1.4 Liberatoria per la riproduzione

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, fotocopiata o trasmessa elettronicamente in alcuna forma senza l'esplicito permesso scritto di Avedro, Inc.

1.5 Dichiarazione sull'assistenza fornita all'utente

Se si incontrano difficoltà nell'utilizzo del Sistema KXL in dotazione, rivolgersi al rappresentante autorizzato Avedro più vicino.

1.6 Controindicazioni, avvertenze e avvisi di attenzione

1.6.1 Controindicazioni

Questa sezione illustra le situazioni che precludono l'utilizzo del dispositivo quando i rischi risultanti dall'uso superano di gran lunga ogni possibile vantaggio. Le condizioni controindicate comprendono:

- Spessore della cornea, con epitelio, inferiore a < 375 micron.
- Precedente intervento chirurgico sulla cornea
- Cheratite ulcerosa periferica
- Pazienti afachici
- Pazienti pseudofachici senza impianto di lente con filtro UV.
- Donne in gravidanza o allattamento
- Bambini

1.6.2 Avvertenze

Spetta al medico valutare i potenziali benefici nei pazienti che manifestino le seguenti condizioni:

- Cheratiti da herpes simplex ed herpes zoster, erosione corneale ricorrente, distrofia corneale
- Disturbi della cicatrizzazione epiteliale.

1.6.3 Avvertenza per la sicurezza elettrica

Per la classificazione dell'attrezzatura, consultare il capitolo 5.0 Classificazione dell'attrezzatura



AVVERTENZA: onde evitare il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio protettiva.

Anche quando il cavo di alimentazione fosse rimosso sussiste il rischio di scosse elettriche trasmesse dalla sorgente di alimentazione interna a 12V CC.

Il sistema è progettato per il funzionamento in continuo mediante un connettore esterno o la batteria ricaricabile interna.



AVVERTENZA: l'attrezzatura viene utilizzata con tensioni pericolose che possono causare scosse elettriche e ustioni con esito talvolta letale. Per ridurre la possibilità di scosse elettriche e di esposizione accidentale agli UVA, non rimuovere i pannelli fissati. Verificare che tutti gli interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul sistema che esulino da quanto specificato in questo manuale, compresi quelli sulla batteria ricaricabile, siano affidati unicamente a personale di assistenza qualificato Avedro.



AVVERTENZA: prima di ogni intervento di assistenza o di pulizia (disinfezione) dell'attrezzatura staccare la spina a parete e spegnere l'interruttore generale.

Non afferrare mai il cavo per staccare la spina dalla presa. Per scollegare, afferrare la spina del cavo ed estrarla dalla presa.



AVVERTENZA: non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.



AVVERTENZA: posizionare il cavo di alimentazione in modo che sia impossibile inciamparci, calpestarlo, rotolarlo, danneggiarlo, piegarlo, impigliarlo o accidentalmente estrarlo dalla presa a muro.



AVVERTENZA: non utilizzare lo strumento in prossimità di acqua ed esercitare la massima cautela per non versare accidentalmente liquidi su qualsiasi sua parte.



AVVERTENZA: la porta USB può essere utilizzata solo quando il sistema non è in modalità trattamento, non collegare pertanto la porta USB quando è in corso un trattamento.



AVVERTENZA: non azionare il Sistema KXL in presenza di miscele infiammabili o anestetici.



AVVERTENZA: nessuna modifica di questo apparecchio è permesso.



AVVERTENZA: non dirigere mai lo sguardo direttamente sul raggio di luce UV. Non orientare mai il raggio verso una persona eccetto per fini terapeutici.



AVVERTENZA: il comando a distanza contiene batterie sostituibili; se il sistema deve restare inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.

1.7 Sicurezza del paziente

- Il trattamento deve aver luogo in un'atmosfera tranquilla e rilassata per non distrarre l'attenzione del paziente. Questi deve stare disteso su un tavolo o seduto su una sedia. Il capo deve riposare comodamente sul poggia-testa. È della massima importanza che il tavolo, la sedia del paziente o il sistema non si spostino durante il trattamento.



ATTENZIONE: il Sistema KXL è un dispositivo medico. Deve essere utilizzato pertanto solo in strutture sanitarie o ambienti medici sotto la diretta supervisione di personale medico appositamente formato.

1.8 Ulteriori considerazioni sulla sicurezza

- La densità di flusso radiante UV del Sistema KXL è precalibrata in fabbrica e deve essere verificata annualmente. Ogni modifica del raggio di luce in uscita dal sistema per mezzo di elementi ottici è severamente vietata.
- La strumentazione di plastica quale ad es. gli speculum palpebrali o gli occlusori possono danneggiarsi se colpiti dal raggio UV determinando un deterioramento del prodotto. Utilizzare pertanto solo gli accessori o gli strumenti chirurgici in acciaio inossidabile raccomandati da Avedro.
- Le superfici metalliche levigate possono riflettere nonostante i tentativi di renderle opache. Utilizzare pertanto solo strumenti raccomandati per uso con il laser.

1.9 Avviso di conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata controllata e riconosciuta conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle Norme FCC (Federal Communications Commission, Commissione comunicazioni federali degli Stati Uniti d'America). Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza; se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantito che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questa attrezzatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, condizione che può essere accertata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'attrezzatura ad una presa elettrica su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare in merito il Servizio di assistenza clienti di Avedro.

Utilizzare cavi e connettori muniti di messa a terra, adeguatamente schermati e rispondenti ai limiti stabiliti per le emissioni dalla FCC. I cavi adatti e i connettori possono essere richiesti ad Avedro. Avedro declina ogni responsabilità per ogni interferenza radio o televisiva causata da modifiche o riparazioni non autorizzate di questa apparecchiatura. Modifiche o riparazioni non autorizzate possono invalidare l'autorizzazione ad utilizzare l'apparecchio.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.

2 Introduzione

2.1 Panoramica del sistema

Il Sistema KXL è un dispositivo medico elettronico che emette luce ultravioletta (lunghezza d'onda di 365 nm) secondo un pattern circolare sulla cornea dopo l'applicazione di una soluzione di Riboflavina. L'irraggiamento di Riboflavina crea ossigeno singoletto che forma legami intermolecolari nel collagene corneale, irrobustendo la cornea mediante crosslinking. Il flusso UV e il tempo di irraggiamento (vale a dire la fluenza) sulla cornea sono controllati da un computer integrato.

La *testina ottica* alloggia il meccanismo di irraggiamento degli UVA. Il LED è preimpostato dall'azienda produttrice per emettere radiazioni UVA ad una lunghezza d'onda di 365 nm a intensità compresa tra 3 mW/cm² e 45 mW/cm². Un'apertura fissa montata sulla traiettoria del fascio d'irraggiamento UVA viene utilizzata per produrre un'area di irraggiamento circolare uniforme di diametro approssimativo di 9 mm sul piano di trattamento. I laser di allineamento aiutano l'utilizzatore a focalizzare il raggio sulla cornea del paziente. L'allineamento fine del raggio UV mediante osservazione dei laser di allineamento è controllato da un sistema wireless a distanza e da un sistema di guida interno. La potenza di trattamento è selezionabile dall'utente nell'intervallo compreso tra 3 mW/cm² e 45 mW/cm² per incrementi di 1 mW/cm². L'energia totale è selezionabile per incrementi di 0,1 J sull'interfaccia utente, ma i limiti effettivi sono controllati dalla scheda RFID di trattamento.

Il KXL è un sistema portatile con un braccio articolato che consente di muovere il sistema per allineare il raggio UV alla cornea del paziente. Una batteria interna alimenta il sistema, la batteria è ricaricata da un caricabatterie interno collegabile ad una qualsiasi presa CA standard. I parametri di trattamento (periodo di induzione della riboflavina, Energia UV totale, potenza UV e tempi di ciclo d'impulso UV) vengono selezionati dall'interfaccia a schermo tattile del computer.

Il sistema KXL viene utilizzato unitamente ad una soluzione di riboflavina e una scheda RFID.

2.1.1 Componenti principali

I componenti principali del Sistema KXL comprendono:

- **Testina ottica con sorgente UV**
- **Console KXL con interfaccia utente**
- **Controllo wireless a distanza** (con batterie sostituibili)
- **Kit KXL di trattamento crosslinking accelerato** (monouso, fornito separatamente)



Figura 2-1. Panoramica del sistema

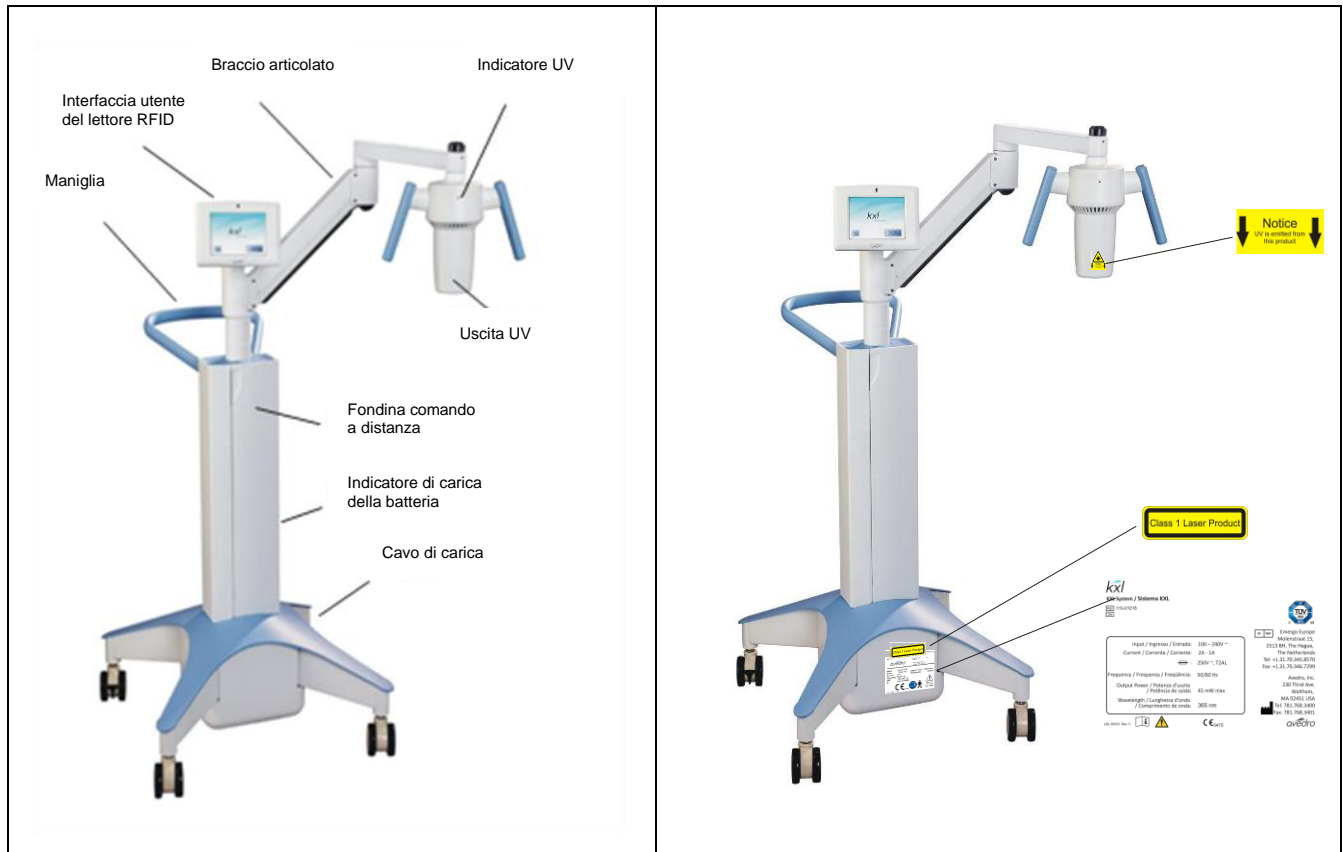


Figura 2-2. Illustrazioni del sistema con didascalie



Figura 2-3. Wireless a distanza

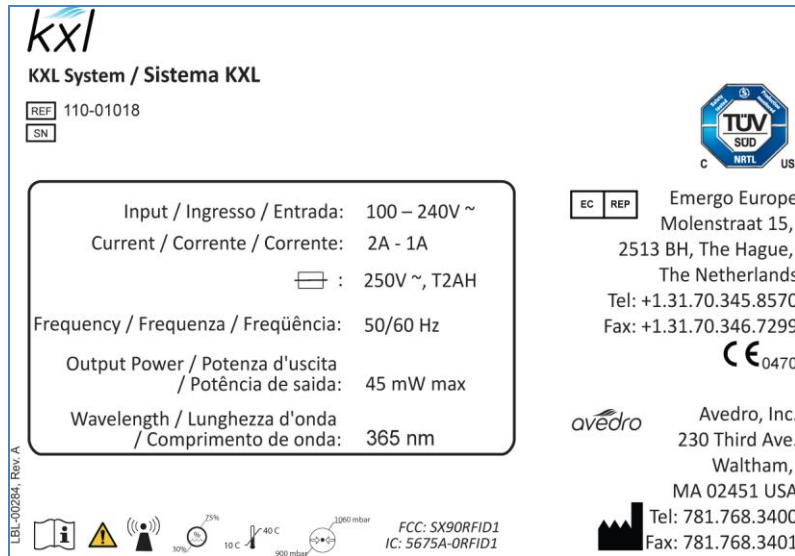


Figura 2-4. Etichetta KXL

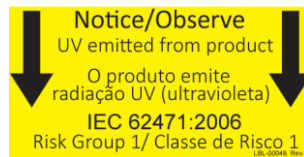


Figura 2-5. Etichetta di emissione UV



Figura 2-6. Etichetta di classificazione del laser

3 Funzionamento del sistema

3.1 Caricamento della batteria del KXL



NOTA: prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, caricare per una notte il pacco batterie interno del KXL.

- A conclusione di ogni giornata lavorativa o quando resta inutilizzato, si raccomanda di collegare il KXL a una sorgente di alimentazione munita di messa a terra per conservare la carica della batteria.
 - Lo stato di carica della batteria è identificato dal colore della luce sulla colonna del KXL.
 - Arancione – bassa, in carica
 - Gialla – in carica
 - Verde – interamente carica
- NOTA: se la batteria non sembra restare in carica o non si ricarica, rivolgersi al rappresentante del Servizio di assistenza Avedro di fiducia.


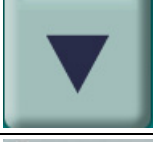




NOTA: la carica della batteria del KXL dura 16 ore in condizioni d'uso normali. Il software del sistema notificherà all'utente quando la batteria necessita di una ricarica. Il sistema KXL vieta il trattamento se la carica della batteria è insufficiente ad eseguirlo. (Per altre informazioni sulla risoluzione dei problemi della batteria, vedere il Capitolo 4.0 Manutenzione.)

3.2 Uso del touchpad e della tastiera

La tabella seguente identifica e illustra i tasti importanti del touchpad (tastierino) e le icone, uniche al sistema, necessarie al funzionamento del Sistema KXL. Il capitolo 2 identifica e descrive i componenti principali del sistema.

Tasto del touchpad	Icona	Descrizione/funzione
Pulsante Power Off (di spegnimento), schermata iniziale		Spegne l'alimentazione elettrica del personal computer.
Pulsante Start New Treatment (Avvio nuovo trattamento), schermata iniziale		Ordina al sistema di ripetere l'intero protocollo di trattamento perché il medico possa trattare un altro paziente.

Capitolo 3: Funzionamento del sistema

Tasto del touchpad	Icona	Descrizione/funzione
Freccia SU (varie schermate Protocollo clinico)		Aumenta il valore del campo corrente.
Freccia GIÙ (varie schermate Protocollo clinico)		Diminuisce il valore del campo corrente.
Pulsante X (varie schermate Device Settings (Impostazioni dispositivo))		Cancella tutti i dati immessi in una particolare schermata e torna alla schermata precedente.
Pulsante segno di spunta (varie schermate Protocollo clinico e schermata Device Settings)		Accetta i dati immessi nella schermata corrente e avanza alla fase successiva.
Pulsante Cancel Session (Elimina sessione), (varie schermate Protocollo clinico)		Elimina una sessione di trattamento di un particolare paziente. A conferma della decisione si visualizza un prompt.
Pulsante Return to Treatment (Ritorna al trattamento), (schermata Confirm Cancel Session (Conferma eliminazione di sessione))		Elimina il comando Cancel Session e torna alla schermata Treatment.
Pulsante Return (Ritorno), (varie schermate Device Settings)		Torna al menu Device Settings.



ATTENZIONE: il Sistema KXL deve essere azionato unicamente da personale qualificato ed esperto.

3.3 Energia UV (dose)

- L'energia UV (dose) è il prodotto dell'energia UV (Intensità) e del tempo di irraggiamento UV. L'energia UV e la potenza UV sono regolabili e il valore calcolato del tempo di irraggiamento UV si visualizza sul display.
- Durante il trattamento il sistema registra l'energia UV, la potenza UV, il tempo di irraggiamento UV e la durata totale del trattamento.
- Le modalità di trattamento UV disponibili sono due: Continuous (Continua) e Pulsed (Pulsata).
- Modalità continua: l'emissione di UV in uscita è costante per la durata del trattamento UV.

Parametri della modalità continua:

Periodo di induzione:	1 secondo – 30 minuti
*Energia UV:	1,0 – 10,7 Joule
Potenza UV:	3 – 45 mW/cm ²

* L'energia UV è selezionabile dall'utente per incrementi di 0,1 Joule. L'intervallo dell'energia è controllato dalla scheda RFID.

- Modalità pulsata (pulsed): l'uscita UV si accende e si spegne a intervalli selezionati dall'utente.

Parametri della modalità pulsata:

Periodo di induzione:	1 secondo – 30 minuti
*Energia UV:	1,0 – 10,7 Joule
Potenza UV:	15 – 45 mW/cm ²

Tempo di funzionamento UV: 1,0 – 4,0 secondi

Durata inattività UV: 1,0 – 4,0 secondi

* L'energia UV è selezionabile dall'utente per incrementi di 0,1 Joule. L'intervallo dell'energia è controllato dalla scheda RFID.

Per informazioni sulla formulazione, consultare le Istruzioni per l'uso della Riboflavina.

3.4 Preparazione del sistema

- Posizionare il Sistema KXL accanto al tavolo o alla sedia di trattamento. Bloccare le rotelle per bloccare il dispositivo in posizione.
- Verificare che il sistema sia acceso (ON).
- Ispezionare il finestrino di vetro dell'apertura fascio verificando che non vi sia polvere o sporcizia depositata. Per istruzioni sulla pulizia, vedere le sezioni 4.8 e 4.9.

3.5 Operazioni importanti precedenti all'accensione del sistema

- Spetta all'utente assicurare che il Sistema KXL funzioni in modo appropriato e sia in condizioni operative ottimali, prima di avviare il trattamento.
- Per garantire un funzionamento ottimale del sistema, considerare i seguenti punti indispensabili:
 - Ispezionare il dispositivo, gli accessori e i cavi di collegamento verificando che non presentino danni visibili.
 - Considerare la normativa locale vigente per l'utilizzo dei dispositivi elettromedicali portatili.

3.6 Accensione del sistema

- Portare su ON l'interruttore generale singolo sul lato anteriore della console del KXL. Questo interruttore accende tutti i componenti del sistema.



Figura 3-1. Interruttore generale

- Il Sistema KXL avvia una sequenza di accensione, carica il sistema operativo, tutte le configurazioni e i file di riferimento.

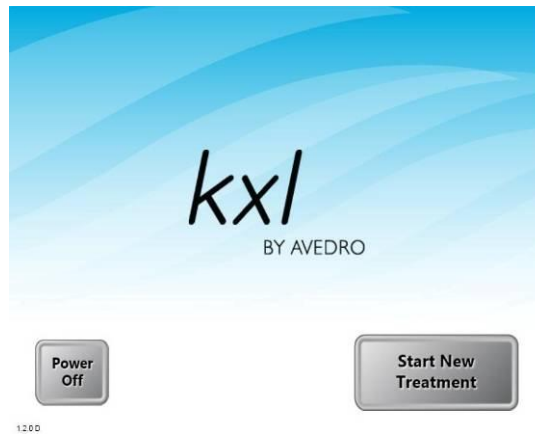


Figura 3-2. Schermata di avvio

- Per avviare il trattamento del paziente, premere il pulsante Start New Treatment.
- Per istruzioni sulla sequenza di spegnimento, fare riferimento alla sezione 3.15.

NOTA: se si è verificato un errore nella procedura di avvio, annotare i messaggi di errore e rivolgersi prontamente per assistenza al distributore o al Servizio di assistenza clienti.

3.7 Impostazione del periodo di induzione della Riboflavina

- Specificare il Riboflavin Induction Period (periodo di induzione della Riboflavina) (1 sec – 30 min).
- Quando l'immissione dei parametri sarà ultimata, premere il pulsante con il segno di spunta.

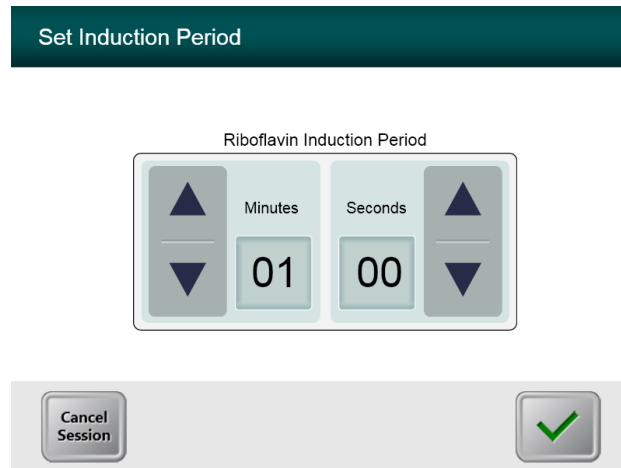


Figura 3-3. Schermata del periodo di induzione

NOTA: i parametri predefiniti del trattamento popolano automaticamente i campi selezionabili dall'utente, tuttavia essi possono essere regolati. È possibile modificare le impostazioni predefinite, a tal fine vedere la sezione [3.16.5, Schermata di modifica dei parametri predefiniti del trattamento](#).

3.8 Selezione della modalità di trattamento

Le modalità di trattamento UV disponibili sono due: Continuous (Continua) e Pulsed (Pulsata).

- Modalità Continuous: l'emissione di UV in uscita è costante per la durata del trattamento UV.
- Modalità Pulsed: l'emissione di UV si accende (ON) e si spegne (OFF) a intervalli selezionati dall'utente.

3.8.1 Modalità di trattamento UV Continuous

- Selezionare la modalità di trattamento Continuous
- Quando l'immissione dei parametri sarà ultimata, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

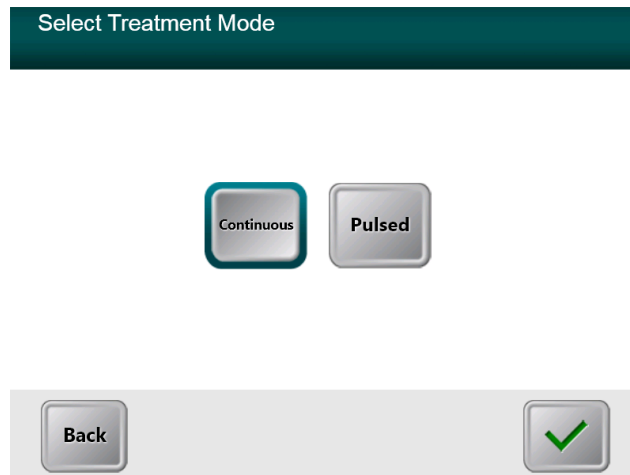


Figura 3-4. Schermata di selezione della modalità di trattamento Continuous

- Immettere i parametri di trattamento UV desiderati:
 - *Total Energy (Energia totale) (1,0 – 10,7 J/cm²)
 - UV Power (Potenza UV) (3 – 45 mW/cm²)

NOTA: il tempo di irraggiamento UV viene visualizzato nel riquadro arancione.

* L'energia UV è selezionabile dall'utente per incrementi di 0,1 Joule. L'intervallo dell'energia è controllato dalla scheda RFID.

- Non appena completata l'immissione dei parametri di trattamento, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

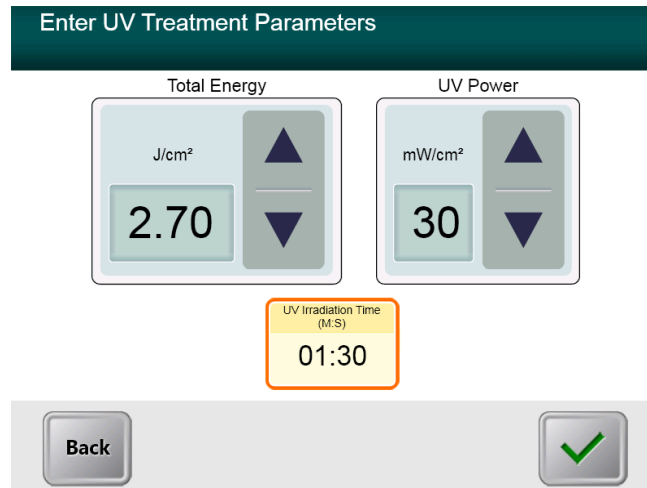


Figura 3-5. Schermata dei parametri di trattamento Continuous

- Confermare i parametri di trattamento specificati premendo sul segno di spunta: se i parametri di trattamento non sono corretti, premere la X e reimmettere quelli desiderati.

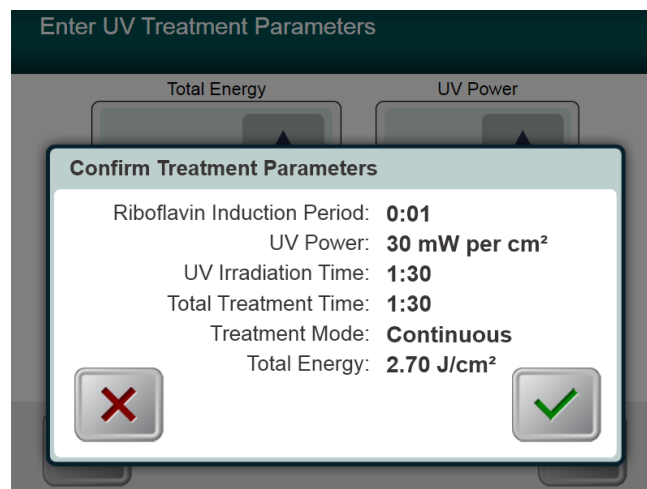


Figura 3-6. Schermata di conferma dei parametri di trattamento Continuous

3.8.2 Esposizione a radiazioni UV pulsate

- Selezionare la modalità di trattamento Pulsed
- Quando l'immissione dei parametri sarà ultimata, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

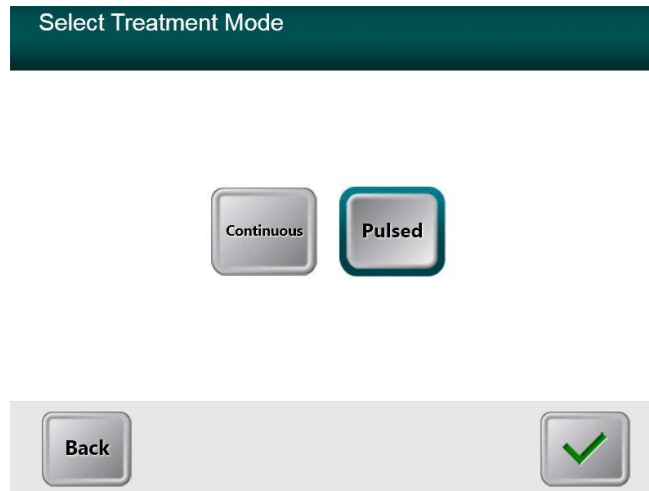


Figura 3-7. Selezione della schermata della modalità di trattamento Pulsed

- Immettere i parametri di trattamento UV desiderati:
 - Total Energy (1,0 – 10,7 J/cm²)
 - UV Power (15 – 45 mW/cm²)
 - NOTA: il tempo di irraggiamento UV viene visualizzato nel riquadro arancione.
 - * L'energia UV è selezionabile dall'utente per incrementi di 0,1 Joule. L'intervallo dell'energia è controllato dalla scheda RFID.
- Non appena completata l'immissione dei parametri di trattamento, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

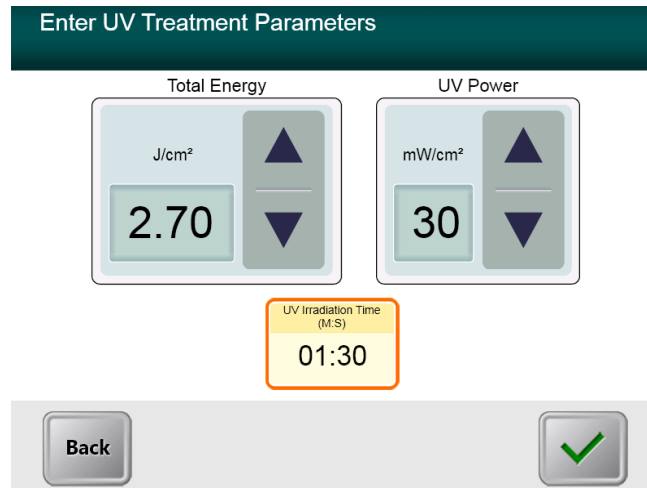


Figura 3-8. Schermata dei parametri di trattamento Pulsed

- Selezionare i tempi desiderati per il ciclo di accensione (ON) e spegnimento (OFF) della radiazione UV.
- Non appena completata l'immissione dei parametri di trattamento, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

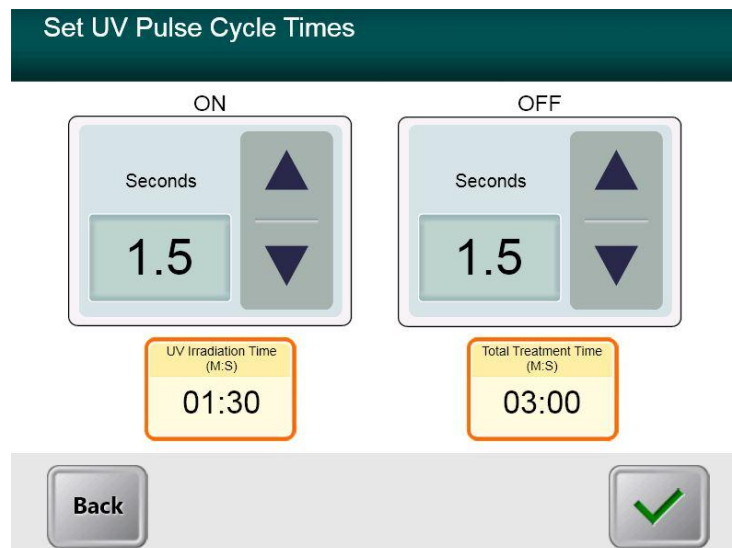


Figura 3-9. Schermata di impostazione dei tempi del ciclo di impulsi UV.

- Confermare i parametri di trattamento specificati premendo sul segno di spunta: se i parametri di trattamento non sono corretti, premere la X e reimmettere quelli desiderati.

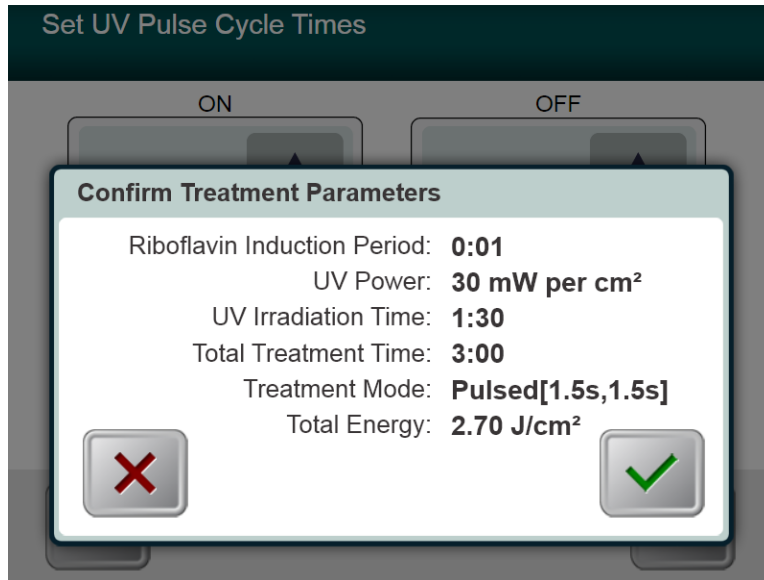


Figura 3-10. Schermata di conferma dei parametri di trattamento Pulsed

3.9 Avvio del trattamento

- Posizionare la scheda di attivazione sul lettore RFID e tenerla in posizione fino ad avvertire il segnale acustico emesso dal sistema.

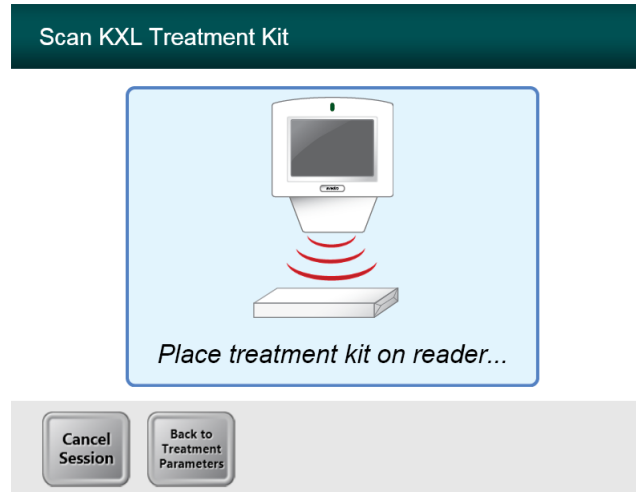


Figura 3-11. Lettura dei materiali smaltibili monouso

3.9.1 Materiali smaltibili monouso

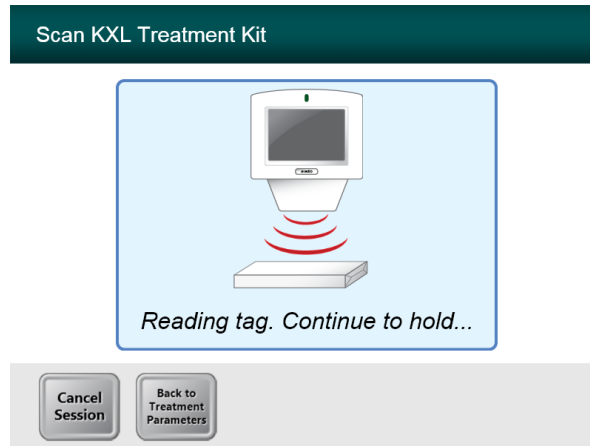


Figura 3-12. Schermata di lettura dell'etichetta

- Attendere il termine della lettura, quindi smaltire il tag o la scheda di attivazione.

3.9.2 Materiali smaltibili multiuso

- Dopo la scansione di una scheda di attivazione multiuso, il display visualizzerà il numero di trattamenti rimasti sulla scheda.

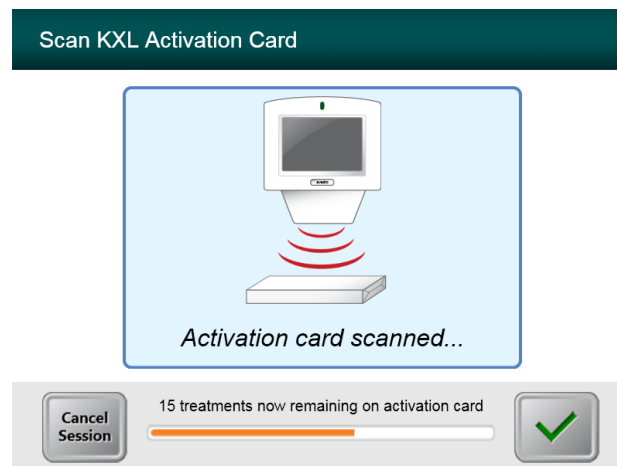


Figura 3-13. Trattamenti rimasti

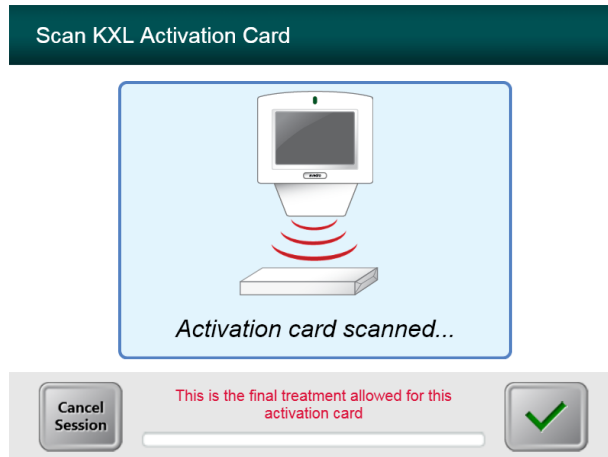


Figura 3-14. Trattamento finale

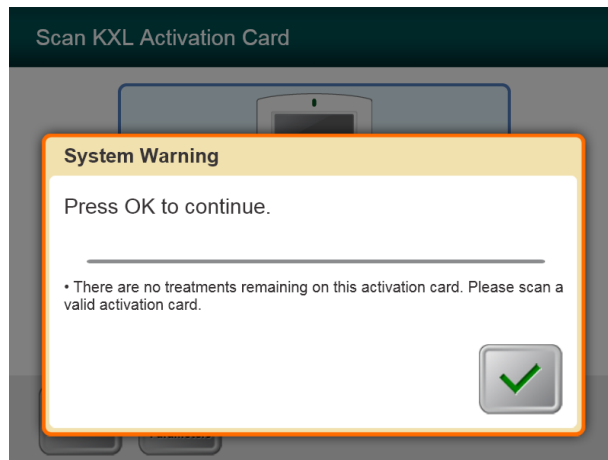


Figura 3-15. Nessun trattamento rimasto

3.9.3 Limiti controllati dalla scheda RFID

- Se l'utente ha in precedenza programmato un intervallo di energia UV eccedente l'intervallo ammesso controllato dalla scheda RFID, visualizzerà il seguente messaggio.

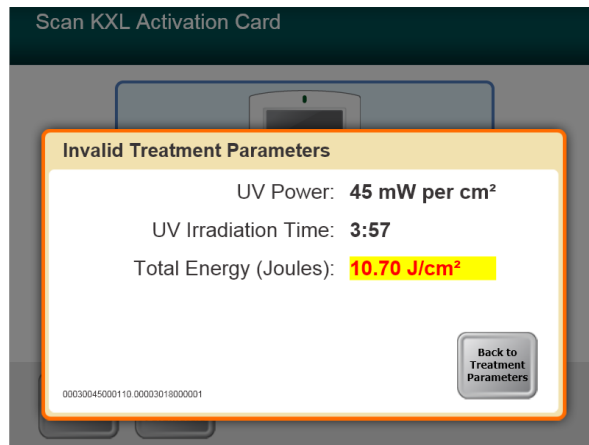


Figura 3-16. Parametri di trattamento non validi

- Premere Back to Treatment Parameters per immettere il parametro appropriato.

3.9.4 Sincronizzazione di allineamento a distanza

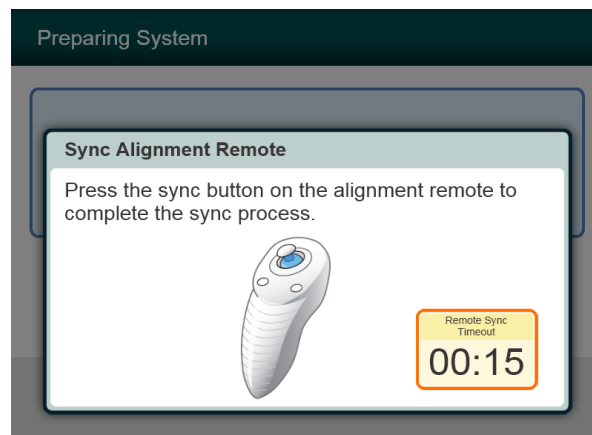


Figura 3-17. Stato dell'impostazione del sistema

- Premere il tasto "S" sul telecomando per sincronizzare il telecomando nell'intervallo di 15 secondi visualizzato sullo schermo. Questa operazione è necessaria per ogni procedura.

Stato degli indicatori luminosi	Significato
ACCESO	Attivamente sincronizzato con il dispositivo
Lampeggiante una volta al secondo per 10 secondi	Disconnette la sincronizzazione (dopo l'intervento)
Lampeggiante costantemente, due volte al secondo	Sostituire immediatamente le batterie (2 AAA)

3.10 Preparazione del paziente

- Verificare che il paziente sia disteso sul tavolo o comodamente seduto sulla sedia. Il capo deve essere appoggiato sul poggia-testa.
- Regolare il tavolo o la sedia e il poggia-testa perché possa restare comodamente seduto per l'intera durata del trattamento senza muovere il capo.
- Applicare uno speculum palpebrale e i teli opzionali adottando una tecnica clinica standard.
- Applicare la Riboflavina all'area di trattamento in accordo con le Istruzioni per l'uso (IFU) della Riboflavina.



ATTENZIONE: la Riboflavina (vitamina B2) non fa parte del Sistema KXL illustrato in questo manuale. Per i dettagli sull'uso del componente, fare riferimento alle relative Istruzioni per l'uso.

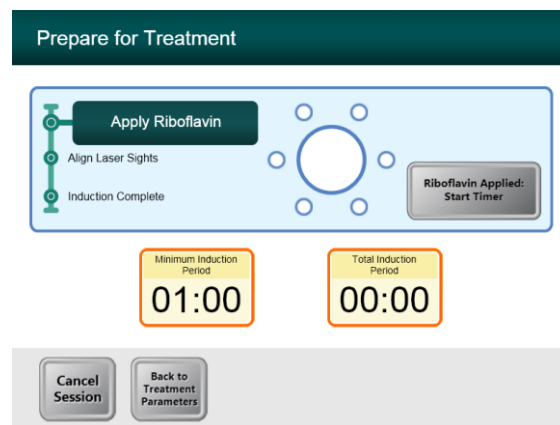


Figura 3-18. Schermata Preparazione del paziente

NOTA: una volta applicata la Riboflavina sull'occhio, avviare l'induzione premendo il pulsante “Riboflavin Applied: Start Timer (Riboflavina applicata: avviare il timer)”.

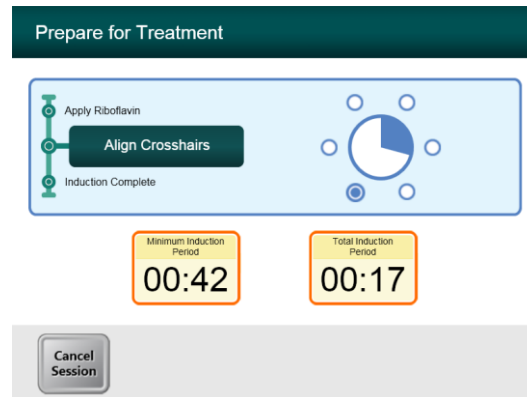


Figura 3-19. Allineamento dei crocini durante l'induzione

- Il KXL dispone di due laser di allineamento.
 - Il crocino rosso per il posizionamento dell'asse X e dell'asse Y.
 - Un punto verde o un secondo crocino rosso per il posizionamento dell'asse Z.
- *Nota: perché l'allineamento sia corretto quando si utilizza il comando a distanza, il logo Avedro sulla testina ottica deve essere rivolto verso l'utente*
- Spostare manualmente la testina ottica in avanti e indietro e a sinistra e a destra finché i crocini rossi degli assi X/Y non si allineano con il centro della pupilla.
- Spostare la testina ottica in alto e in basso per allineare il puntino verde o il secondo crocino rosso dell'asse Z sul centro del primo crocino rosso.
- All'occorrenza, regolare di precisione l'allineamento utilizzando il comando a distanza wireless.

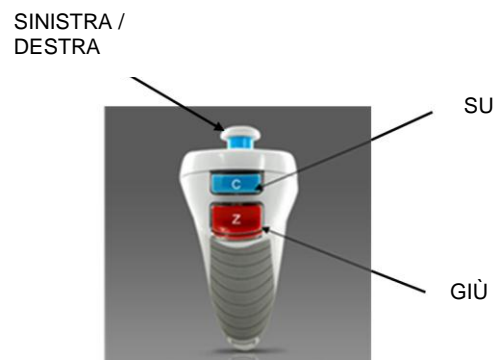


Figura 3-20. Funzioni del comando a distanza

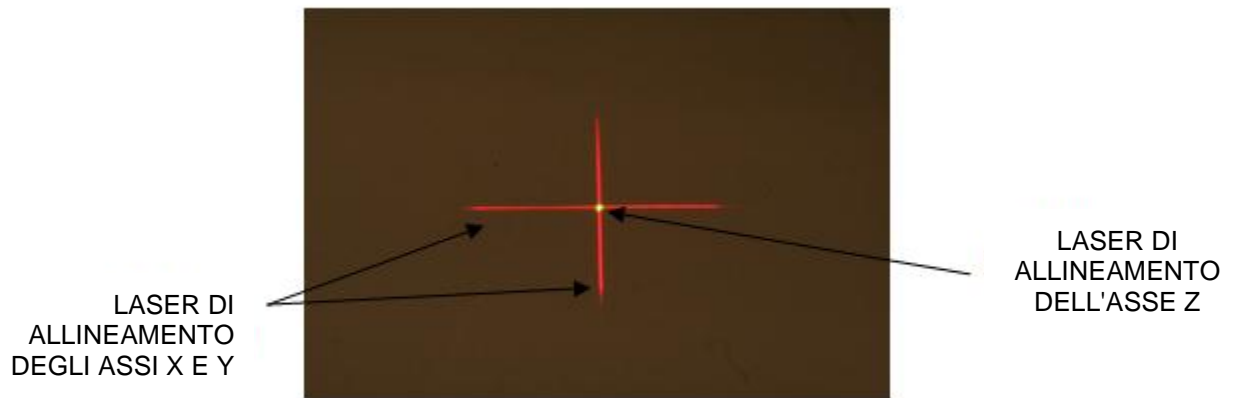


Figura 3-21. Allineamento dei crocini rossi degli assi X e Y e del puntino verde dell'asse Z

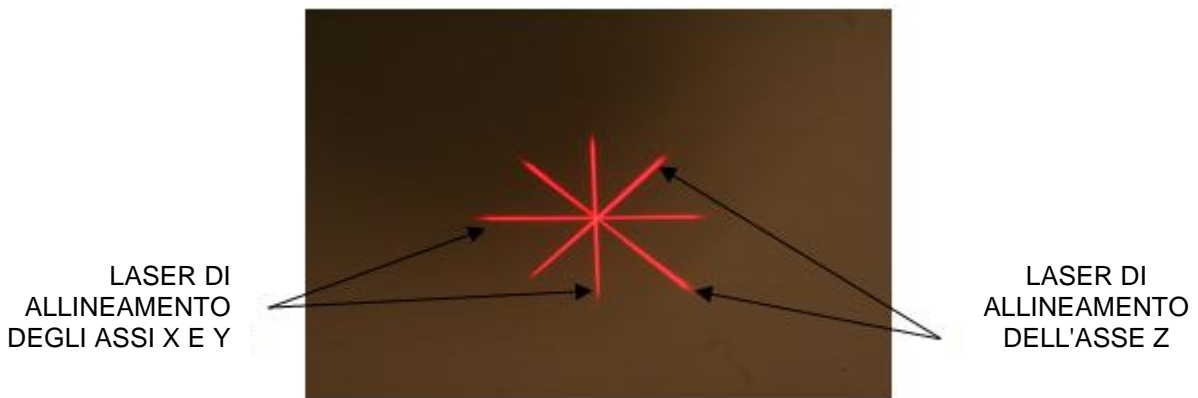


Figura 3-22. Allineamento dei crocini rossi degli assi X e Y e dei crocini rossi dell'asse Z

3.11 Avvio del trattamento

- Una volta trascorso il Tempo d'induzione, si visualizza il pulsante “Begin UV Treatment” (Avvio del trattamento UV). Premere il pulsante “**Begin UV Treatment**” per iniziare il trattamento.

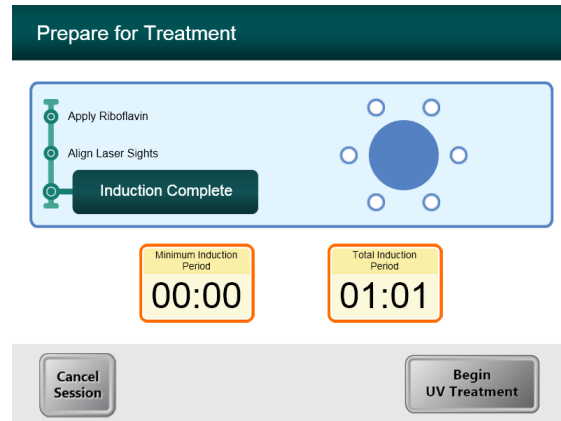


Figura 3-23. Induzione completata



AVVERTENZA: iniziare i trattamenti solo dopo aver applicato il fotosensibilizzatore.



ATTENZIONE: la luce UV viene emessa quando il logo Avedro sulla testina ottica muta di stato.



AVVERTENZA: verificare che il Sistema KXL e il tavolo o la sedia del paziente siano stabilizzati e non si muovano dopo l'allineamento e durante il trattamento.

3.12 Monitoraggio del trattamento

- Verificare continuamente che l'area d'interesse della cornea sia sempre illuminata di luce UVA e regolare all'occorrenza utilizzando il comando a distanza wireless.

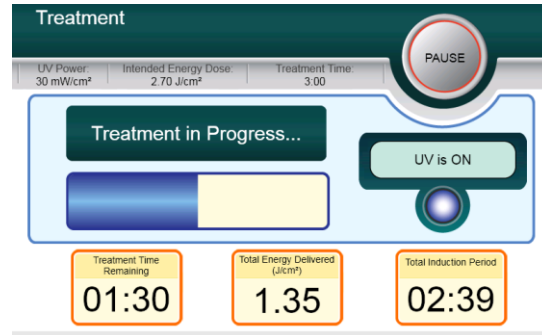


Figura 3-24. Schermata Trattamento

NOTA: quando si usa la modalità di trattamento Pulsed, la luce UVA non risulterà visibile durante i periodi spento. Durante questi cicli l'interfaccia utente non visualizzerà la dicitura “UV is OFF (UV spento)”.

- Durante l'intero trattamento il paziente deve fissare il crocino di allineamento rosso degli assi X e Y.
- I pazienti devono restare fermi durante il trattamento.

3.13 Sospensione del trattamento

- Il trattamento si arresta automaticamente allo scadere del tempo programmato dall'operatore sul timer.
- L'operatore può decidere se arrestare o sospendere temporaneamente il trattamento. In tal caso, la luce UV può esser spenta (OFF) premendo il pulsante **Pause (Pausa)**.

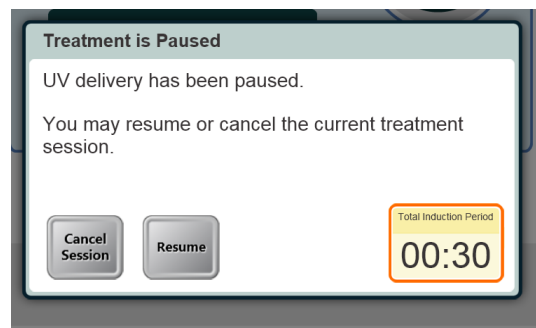


Figura 3-25. Schermata Trattamento in pausa

- Per annullare o riprendere il trattamento, premere rispettivamente il pulsante Cancel Session o Resume. Per cancellare una sessione, vedere la sezione 3.15.

3.14 Trattamento completato

- Al completamento del trattamento saranno visualizzati i parametri di trattamento totali e la schermata visualizzerà la dicitura Treatment complete. Premere **Start New Treatment** per avviare il trattamento successivo.



Figura 3-26. Schermata Trattamento completato

- Per uscire dal trattamento e/o avviarne uno nuovo, premere **Start New Treatment**.
- Se i trattamenti sono completi, spegnere (OFF) il sistema premendo sul pulsante “Power Off (Spegnimento)” nella schermata principale.
- Rimuovere con cautela il dispositivo dall'area riservata al paziente.
- Applicare un unguento antibiotico sulla cornea e coprirlo quindi con una lente per bendaggio (lente a contatto morbida terapeutica).
- Rimuovere lo speculum.
- Somministrare il trattamento farmacologico post-operatorio utilizzando un regime simile a quello successivo a cheratotomia fotorefrattiva (PhotoRefractive Keratectomy, PRK): farmaci antidolorifici, steroidei e antibiotici.

3.15 Sospensione temporanea o annullamento del trattamento

Se la sessione viene **cancellata**, la schermata visualizza la dicitura **Confirm Cancel Session** (Conferma cancellazione sessione).

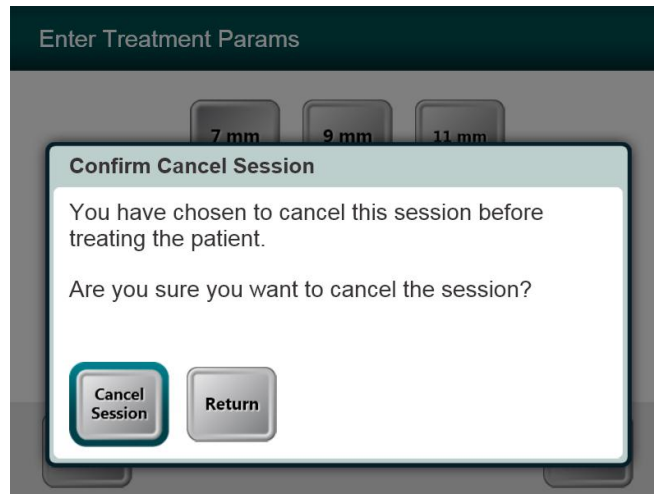


Figura 3-27. Schermata iniziale di conferma della cancellazione di una sessione

- Per cancellare la sessione, premere **Cancel Session**.
- Se la sessione è in **pausa** la schermata visualizza la dicitura **Confirm Cancel Partial Treatment**.

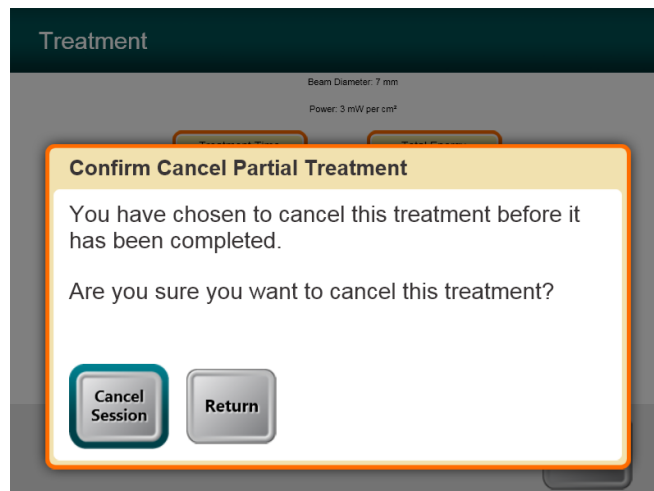


Figura 3-28. Conferma di cancellazione di un trattamento parziale

- Per cancellare la sessione, premere **Cancel Session**.

La schermata visualizza l'intestazione **Partial treatment information** (Informazioni su un trattamento parziale).

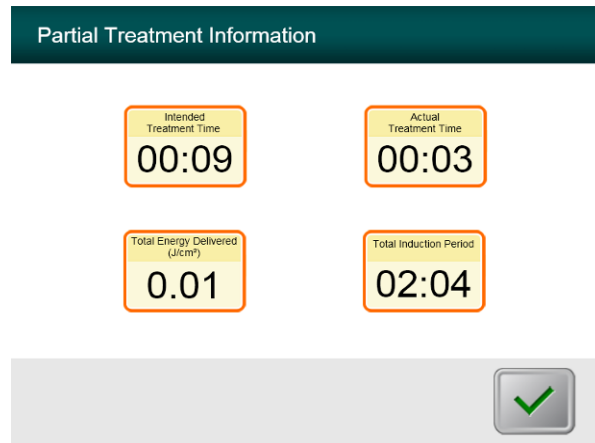


Figura 3-29. Informazioni su un trattamento parziale

3.16 Spegnimento del sistema

Si consiglia di collegare il sistema KXL ad una presa elettrica quando resta inutilizzato o stoccato in magazzino.

A conclusione di ogni giornata lavorativa o quando resta inutilizzato, si raccomanda di collegare il KXL a una sorgente di alimentazione munita di messa a terra per conservare la carica della batteria.



Figura 3-30. Spegnimento

- Premere “Power Off” sul monitor touch screen.
- Attendere che il software di chiudere - lo schermo è vuoto.



Figura 3-31. Interruttore in posizione "Spento" (OFF)

- Dopo che lo schermo è vuoto e il software si spegne, portare l'interruttore generale del sistema su "OFF" (spento).



Figura 3-32. Spina del sistema KXL

- Lasciare il sistema KXL collegato ad una presa elettrica fino all'uso successivo.

3.17 Uso del menu Impostazioni del dispositivo

- Con la schermata iniziale visualizzata (New Patient Start, Avvia nuovo paziente) tenere premuto KXL sul touch screen.

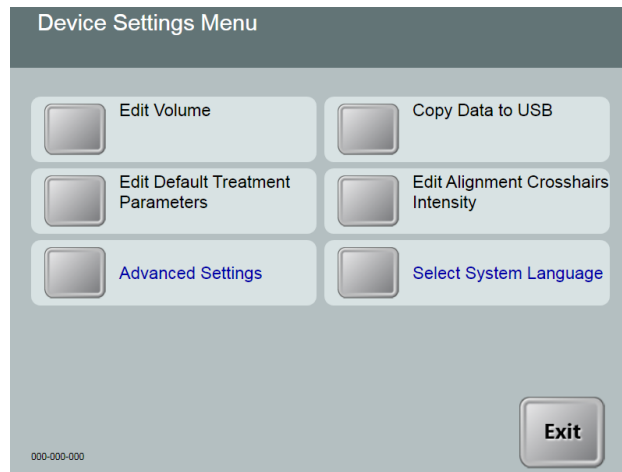


Figura 3-33. Menu Device Settings

3.17.1 Impostazioni avanzate

- Le Advanced Settings (Impostazioni avanzate) sono disponibili solo per Avedro e il personale di assistenza in possesso della scheda di accesso alle Impostazioni avanzate KXL. Se selezionate, l'utente sarà invitato a scansionare la scheda di accesso.

3.17.2 Modifica della lingua del sistema

- L'opzione System Language (Lingua del sistema) consente all'utente di selezionare la lingua dell'interfaccia grafica.
- Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa.

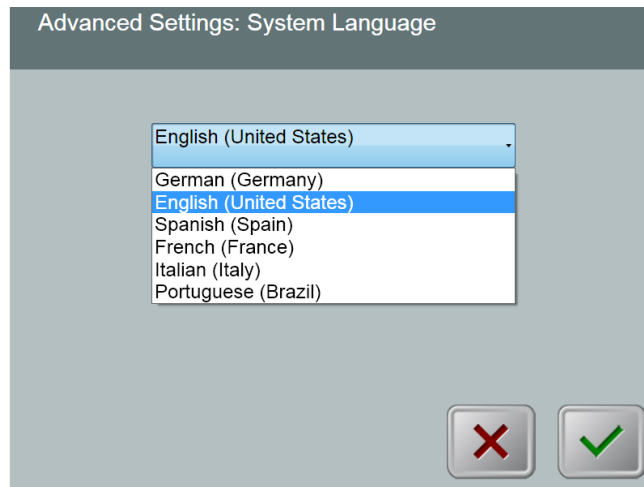


Figura 3-34. Modifica della lingua del sistema

3.17.3 Modifica dell'intensità dei crocini di allineamento

- L'opzione Alignment Crosshairs Intensity (Intensità dei crocini di allineamento) consente all'utente di modificare la luminosità dei crocini di allineamento.
- Selezionare il pulsante **Edit Alignment Crosshairs Intensity** (Modifica intensità dei crocini di allineamento) del menu Impostazioni del dispositivo.

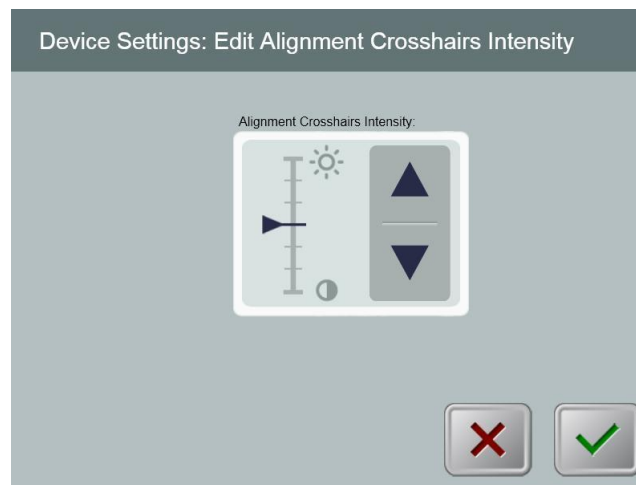


Figura 3-35. Edit Alignment Crosshairs Intensity

3.17.4 Modifica del volume del sistema

- L'opzione Modifica volume consente all'utente di modificare in condizioni di sicurezza il livello del volume del sistema.
- Selezionare il pulsante **Edit Volume (Modifica volume)** del menu Impostazioni di sistema.

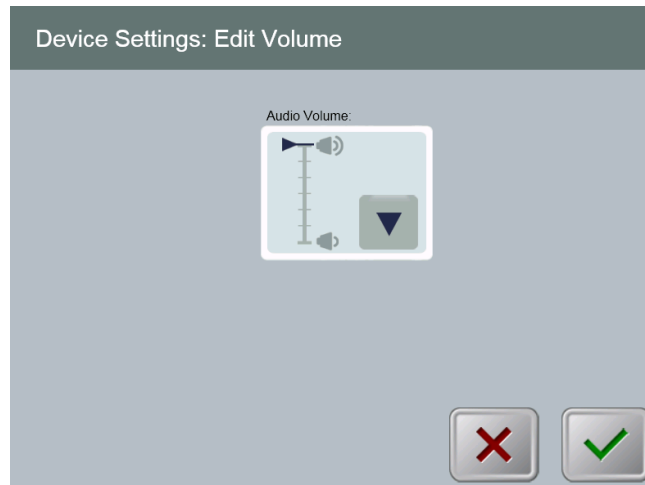


Figura 3-36. Edit Volume

3.17.5 Copia dei dati di trattamento su USB



AVVERTENZA: la porta USB può essere utilizzata solo quando il sistema non è in modalità trattamento, non collegare pertanto nessuna unità alla porta USB durante il trattamento.

- Selezionare il pulsante **Copy Treatment Data to USB (Copia dei dati di trattamento su USB)** dal menu Impostazioni di sistema.



Figura 3-37. Trasferimento delle impostazioni del dispositivo su USB

- Introdurre una chiavetta USB in una porta USB, quindi premere il pulsante **Copy treatment data to USB**. Il sistema avvia il trasferimento dei dati di trattamento e visualizza la barra di avanzamento del trasferimento illustrata nella schermata precedente.
- Appena completata l'operazione, premere il pulsante **Return**. Il sistema torna a visualizzare il menu Impostazioni del dispositivo.

3.17.6 Schermata di modifica dei parametri predefiniti di trattamento

- L'opzione Edit Default Treatment (Modifica dei parametri predefiniti di trattamento) consente all'utente di impostare i parametri di trattamento predefiniti che vengono visualizzati all'apertura delle schermate Set Induction Time (Impostazione del tempo di induzione) e Set UV Parameters (Impostazione dei parametri UV).

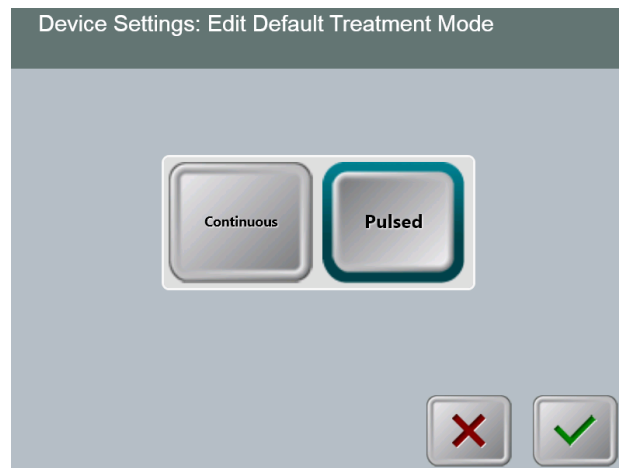


Figura 3-38. Selezione della modalità di trattamento predefinita

- Per continuare, premere il pulsante con il segno di spunta.

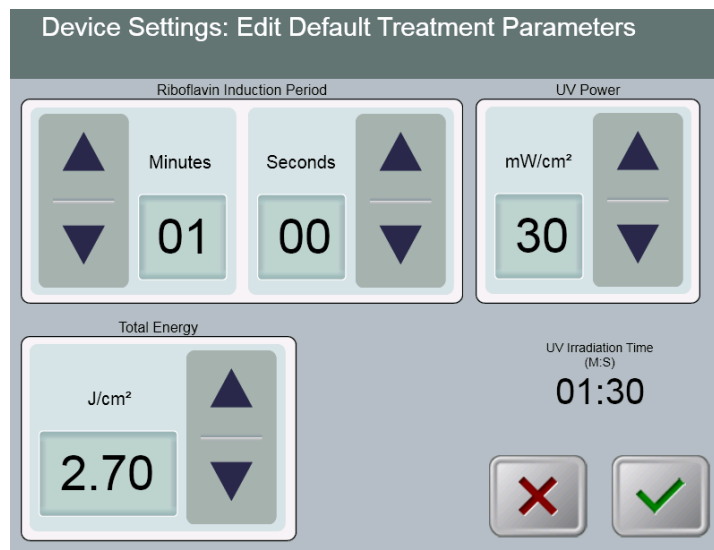


Figura 3-39. Modifica del parametri di trattamento predefiniti (Continuous e Pulsed)

- Non appena completata l'immissione dei parametri di trattamento, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

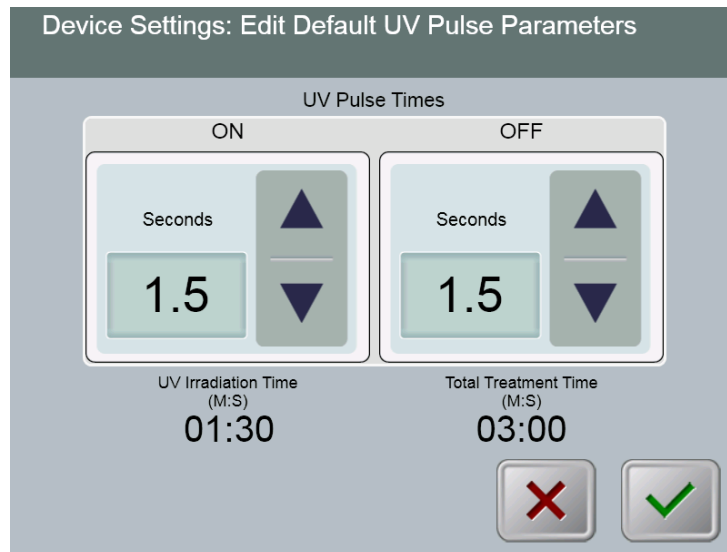


Figura 3-40. Modifica dei parametri di impulso UV predefiniti (solo Pulsed)

- Non appena completata l'immissione dei parametri di trattamento, premere il pulsante con il **segno di spunta**.

4 Manutenzione/Assistenza

Per definizione, “manutenzione” si riferisce alle procedure non-tecniche che un operatore deve eseguire quotidianamente per mantenere il sistema in condizioni operative ottimali. Per contro, la parola "assistenza" si riferisce alle attività da affidare unicamente al personale esperto del Servizio di assistenza.

4.1 Informazioni sull'installazione

- Per ogni nuovo cliente del Sistema KXL il distributore autorizzato Avedro fornisce l'installazione iniziale completa e la messa in servizio del sistema. Dopo l'installazione iniziale, se il sistema non funziona correttamente, il rappresentante Avedro può decidere di fornire una formazione di base sulle operazioni principali del Sistema KXL ad un operatore designato.
- Di conseguenza, questo manuale non comprende alcuna istruzione specifica relativa all'installazione o all'impostazione del sistema. Nel rispetto di quanto specificato nel contratto di assistenza, ogni ulteriore regolazione dell'hardware che esuli dal funzionamento definito "normale" deve essere eseguita da, o sotto la guida di personale del distributore autorizzato da Avedro.

4.2 Manutenzione affidata al cliente

- In generale il sistema KXL non prevede interventi di manutenzione a cura del cliente. Tutti gli interventi di manutenzione tecnica o di assistenza devono essere affidati a un addetto all'assistenza adeguatamente addestrato per la durata del contratto di assistenza. Se si verificano problemi nel sistema, consultare la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi o rivolgersi al rappresentante Avedro di fiducia.

4.3 Garanzia

- Viene fornita separatamente una garanzia assieme alle informazioni sull'acquisto.

4.4 Informazioni sul contratto di assistenza

- Per tutti i sistemi KXL è previsto un contratto di assistenza. Il contratto prevede aggiornamenti regolari per la manutenzione e interventi in sede. Prevede anche le richieste di assistenza impreviste che possano rendersi necessarie.

4.5 Materiali monouso per il paziente

- I materiali monouso per il paziente possono essere ordinati da Avedro o dal distributore autorizzato da Avedro. **Per il Sistema KXL, utilizzare solo prodotti Avedro o prodotti approvati da Avedro.** Avedro declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti del sistema che ritenga imputabili all'uso di materiali non autorizzati.

4.6 Risoluzione dei problemi

- Il Sistema KXL controlla il suo stato automaticamente all'avvio. Se rileva un malfunzionamento, il software impedisce all'operatore di avviare i trattamenti con il sistema in condizioni di funzionamento normali.

Wireless a distanza

- Il Sistema KXL utilizza un controllo a distanza con batterie sostituibili. Se lo stato di carica delle batterie è basso, il sistema perde il collegamento con il comando a distanza e notifica all'utente la necessità di risincronizzare, né consente all'utente di avviare la procedura. Se la sincronizzazione a distanza si interrompe durante un trattamento, l'utente sarà avvisato perché stabilisca se desidera proseguire il trattamento pur senza il controllo

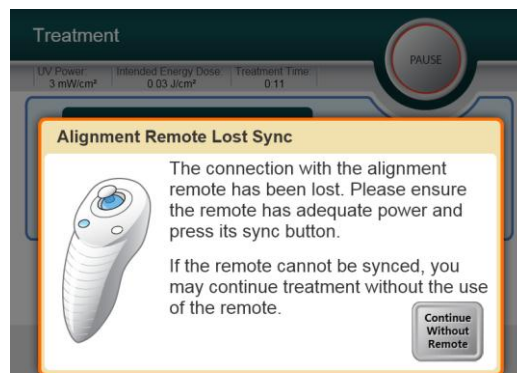


Figura 4-1. Perdita della sincronizzazione con il comando a distanza

a distanza.

- Se la spia sul telecomando lampeggia due volte al secondo, è necessario sostituirla le batterie. Se la spia sul comando a distanza lampeggia una volta al secondo, il comando non è sincronizzato.
- Se premendo il pulsante “Sincronizzazione” la sincronizzazione con il telecomando non avviene, provvedere alla sostituzione delle batterie.
- Se sostituendo la batteria il sistema non effettua ancora la sincronizzazione, rivolgersi al rappresentante del Servizio di assistenza Avedro di fiducia.

Batteria ricaricabile interna

- Il sistema KXL è fornito completo di una batteria ricaricabile, se il sistema non si accende, verificare che la batteria sia carica collegandola ad una presa e verificando l'indicatore di carica sulla colonna del sistema. Se l'indicatore è arancione o giallo, il sistema sta ricaricando, se è verde, la batteria è interamente carica.
 - Se l'indicatore è verde o giallo e il sistema non si accende ancora, rivolgersi al rappresentante locale del Servizio di assistenza Avedro.

- Se l'indicatore è arancione, attendere che diventi giallo o verde e riaccendere il sistema, se ancora non si accende o se l'indicatore diventa giallo o verde entro 8 ore, rivolgersi al rappresentante locale del Servizio di assistenza Avedro.

4.7 Istruzioni per la sterilizzazione o la disinfezione

- Nessun componente del Sistema KXL deve essere sterilizzato dall'operatore. Spetta all'operatore UNICAMENTE la pulizia e la disinfezione delle superfici esterne. Per la disinfezione, utilizzare solo alcool isopropilico spray o in preparazioni. Utilizzare minime quantità di liquido e un panno soffice senza fibre.

4.8 Pulizia del sistema

- Per pulire il sistema, utilizzare un panno morbido inumidito.
- Pulire le superfici esterne del Sistema KXL con un panno che non formi lanugine inumidito con candeggina diluita, acqua saponata o alcool isopropilico.
- Se necessario, è anche possibile utilizzare alcool al 70% o una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%.
- NON immergere il sistema in liquidi, né versare liquidi sul sistema.



ATTENZIONE: prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di rete e spegnere l'interruttore generale.



ATTENZIONE: gli agenti di pulizia corrosivi, soprattutto quelli contenenti abrasivi o solventi aggressivi, possono danneggiare le superfici dei componenti.

- Il finestrino di vetro dell'apertura del raggio non deve in nessuna circostanza essere posto a contatto con nessuna delle sostanze menzionate.
- Nel pulire le superfici del dispositivo, verificare che i liquidi detergenti non penetrino all'interno onde evitare di danneggiarlo.

4.9 Pulizia dell'apertura

- Ispezionare regolarmente l'apertura del fascio prima del trattamento.
- Utilizzare panni appositi per lenti di telecamera o aria compressa per rimuovere la polvere e le particelle dalla superficie del vetro della fessura.

4.10 Regolazione del braccio articolato

Se il braccio articolato non sostiene la testina ottica in posizione fissa verticale, rivolgersi al rappresentante del Servizio di assistenza Avedro di fiducia.

4.11 Esecuzione della manutenzione periodica

Intervallo	Attività specifica
Annuale	Calibrazione da affidare a personale appositamente addestrato da Avedro.

4.12 Spostamento del sistema

- Il KXL è progettato quale sistema mobile in un ambiente ambulatoriale. Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario trasportare o spedire il Sistema KXL, rivolgersi al rappresentante locale Avedro. L'imballaggio e il trasporto del sistema devono essere eseguiti unicamente da personale formato o autorizzato da Avedro.
- Prima di spostare il sistema KXL da una stanza all'altra, il monitor deve essere spostato lateralmente e la testa ottica deve essere posizionata vicino alla maniglia della spesa con il gomito che sporge sul retro. Il sistema può quindi essere facilmente spinto dalla maniglia carrello attraverso il telaio della porta.

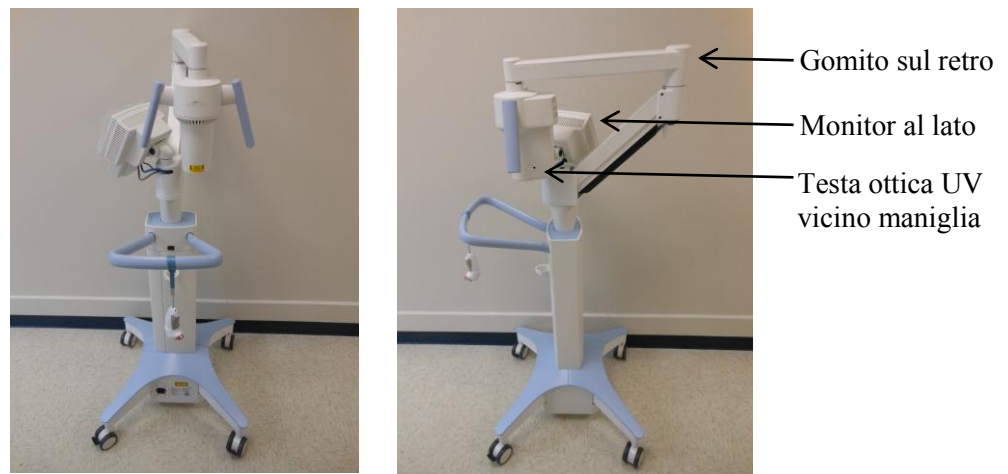


Figura 4-2 Spostamento di configurazione del sistema

4.13 Stoccaggio del sistema

- Rispettare tutti gli intervalli di specifica di temperatura e umidità elencati nel capitolo 7.0 Specifiche.
- Chiudere tutti i pannelli del sistema onde evitare che polvere e umidità penetrino all'interno: questo requisito è inderogabile.
- Spegnerne (OFF) tutti i componenti e scollegare dall'alimentazione di rete. Scollegare fisicamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Rimuovere le batterie dal comando remoto wireless.

- Coprire il display a cristalli liquidi del touch screen e la tastiera con la copertura originale o imballare per prevenire ogni danno.
- Non disassemblare le parti del sistema per prevenire ogni disallineamento o danno.
- Se i sistemi sono rimasti inutilizzati per più di 6 mesi, il sistema di batteria dovrebbe essere caricata. Per la ricarica istruzioni, vedere la sezione 3.1.

4.14 Software

- Se il software si danneggiasse e non funzionasse correttamente in qualsiasi fase del trattamento, rivolgersi al rappresentante dell'Assistenza Avedro locale. Gli aggiornamenti del software devono essere eseguiti unicamente da rappresentanti dell'Assistenza Avedro.

4.15 Identificazione dei rischi associati all'eliminazione dei prodotti di rifiuto

- Nell'eliminare i prodotti di rifiuto, attenersi a tutte le normative locali vigenti.

4.16 Esecuzione di un controllo a vista

- Controllare di routine tutti i componenti del dispositivo prima di ogni trattamento per identificare i possibili danni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato o malfunzionante. L'utilizzo di dispositivi malfunzionanti può danneggiare l'operatore e/o il paziente.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca.

5 Classificazione dell'attrezzatura

Ai sensi della normativa EN60601-1 Apparecchi elettromedicali

- Protezione da scosse elettriche
 - Classe 1 (alimentazione elettrica esterna)
 - Attrezzatura alimentata internamente (funzionamento a batteria interna)
- Grado di protezione da scosse elettriche
 - Non classificato, attrezzatura non fornita con parte applicata
- Grado di protezione dall'ingresso di acqua
 - Dispositivi comuni con grado di protezione IP20 (nessuna protezione da ingresso d'acqua)
- Metodi di sterilizzazione o disinfezione
 - Dispositivo disinfettabile
- Grado di protezione da uso in presenza di miscele infiammabili o anestetiche
 - Nessuna protezione
- Condizioni d'uso
 - Per servizio continuo

Ai sensi del regolamento FCC Parte 15, EN55011 e della normativa EN60601-1-2

- Classe B

Ai sensi della normativa EN60825-1 Sicurezza degli apparecchi laser

- I laser di allineamento sono prodotti laser di classe 1












Ai sensi della normativa EN62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade

- LED UVA appartenente al gruppo di rischio 1

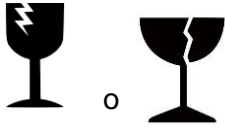
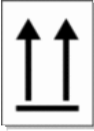
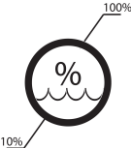

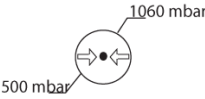

Ai sensi dell'Appendice II.3 della Direttiva 93/42/EEC

- Classe IIa

6 Legenda dei simboli

Dicitura del simbolo	Illustrazione del simbolo	Definizione
1. Simbolo Non a prova di anestetico (Non AP, Anaesthetic proof) in presenza di anestetici infiammabili		Pericolo, rischio di esplosione. Non usare.
2. Simbolo CA		Corrente alternata
3. "I" in un libro		Attenzione: consultare la DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
4. Simbolo di messa a terra racchiuso in un cerchio		Messa a terra protetta (terra)
5. Interruttore generale		Acceso (ON)
6. Interruttore generale		Spento (OFF)
7. Simbolo dei fusibili		Fusibile
8. Marcatura CE		Marchio di conformità
9. Produttore		Nome e indirizzo del produttore
10. ! in un triangolo		Avvertenza per uso della massima cautela nei manuali per l'operatore
11. Peso netto (NW) (kg) Peso lordo (GW) (kg)	NW GW	Peso
12. Ombrello con pioggia		Conservare all'asciutto: conservare protetto dall'umidità (il simbolo può presentare o meno gocce di pioggia)

Capitolo 6: Legenda dei simboli

Dicitura del simbolo	Illustrazione del simbolo	Definizione
13. Bicchiere di vino incrinato		Contenuto fragile, maneggiare con cautela.
14. Due frecce rivolte in alto		Mantenere le frecce sulla scatola rivolte in alto
15. Segno di percentuale sopra onda con limiti		Limiti di umidità (le percentuali sotto il simbolo sono l'intervallo di umidità considerato accettabile)
16. Limiti di temperatura		Limiti di temperatura per la spedizione.
17. Limiti di pressione		Limiti di pressione atmosferica (archiviazione / gestione)
18. Segnale emesso		RF trasmesso attraverso il dispositivo

7 Specifiche tecniche

Valore di specifica	Descrizione
Elettrica	Alimentato a batterie: 12V 35 Ah SLA Tensioni di linea da 100 – 240 volt CA, ± 10% Corrente 2A – 1A Monofase RMS 50/60 Hz, ± 5% Comando a distanza, 2 batterie AAA
Fusibili accessibili all'utente	250 V~ T2AH
Energia emessa	Radiazione UV 3 – 45 mW/cm ² 365 nm
Interfacce esterne	USB 2.0
Dimensioni fisiche	Non superiori a 60 x 60 x 150 cm ³ (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
Peso (del sistema nella cassetta)	Peso netto (NW) 45 Kg Peso lordo (GW) 120 Kg
Durata della batteria (in condizioni di funzionamento normali)	16 ore
Condizioni ambientali di funzionamento	Il sistema funziona nelle seguenti condizioni atmosferiche (senza condensa).
Temperatura ambiente	da +10 a +40 °C
Umidità relativa	da 30% a 75%
Pressione atmosferica	da 700 a 1060 mbar
Condizioni di trasporto e di stoccaggio	Lo strumento tollera le seguenti condizioni di trasporto e stoccaggio senza danni o deterioramento delle prestazioni.
Temperatura ambiente	da -15 a +70 °C
Umidità relativa	da 10% a 100% con condensa
Pressione atmosferica	da 500 a 1060 mbar